

User Manual: Installation on a Tube - Recommended Installation for Wheeleo®

Caution: If you have a carbon frame, check the maximum torque with the manufacturer. Watch the instruction video at: www.wheebag.com/instruction

Installation Steps:

1. Place the rubber pads:

Insert them correctly into their designated position (*1).

2. Choose the metal band:


Select the short or long band depending on the tube diameter.

3. Attach the band and tension plate:

Install them on the tube following the diagram.

4. Secure and adjust the adapter:

Screw the adapter into place, adjust it to the desired position, and tighten firmly.

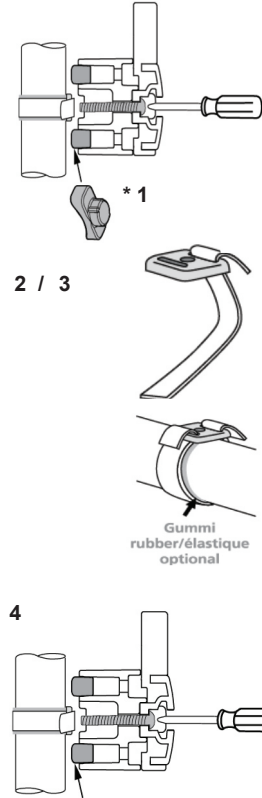

**Your WheeBag® or
accessory is now
ready to be attached!**

User Manual: Installation on a Flat Surface or Panel*

* Only possible if the back of the surface is accessible.

Installation Steps

1. Choose the location:

Identify a suitable spot to attach the adapter. Ensure there is enough space around it to secure your WheeBag® or accessory.

2. Drill the holes:

Drill 2 holes with a 4.5 mm diameter, spaced 26 mm apart (center to center).





3. Attach the base of the adapter:

Use the 2 screws, 2 washers, and round nuts provided. Also position the square tension plate as shown in the diagram.

4. Secure the adapter head:

Screw the head into place in a vertical and straight position.

**Your WheeBag® or
accessory is now ready
to be attached!**

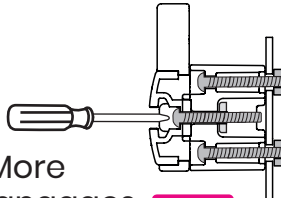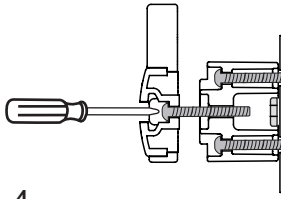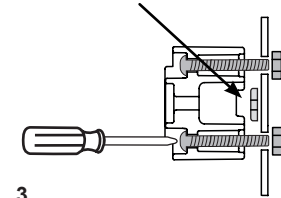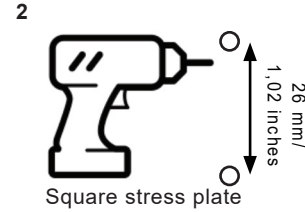

More
languages



WheeBag®



www.wheebag.com

Mode d'emploi : Installation sur un tube - Installation recommandée pour Wheeleo®

Attention : Si vous avez un cadre en carbone, vérifiez le couple de serrage maximal auprès du fabricant.
Consultez la vidéo d'instructions sur : www.wheebag.com/instruction

Étapes d'installation :

1. Placez les patins en caoutchouc :

Insérez-les correctement à leur emplacement (*1).

2. Choisissez la bande métallique :

Sélectionnez la bande courte ou longue selon le diamètre du tube.


3. Fixez la bande et la plaque de tension :

Installez-les sur le tube en suivant le schéma.

4. Fixez et ajustez l'adaptateur :

Vissez l'adaptateur, ajustez-le à la position souhaitée, puis serrez fermement.

**Votre WheeBag® ou
accessoire est prêt
à être fixé !**

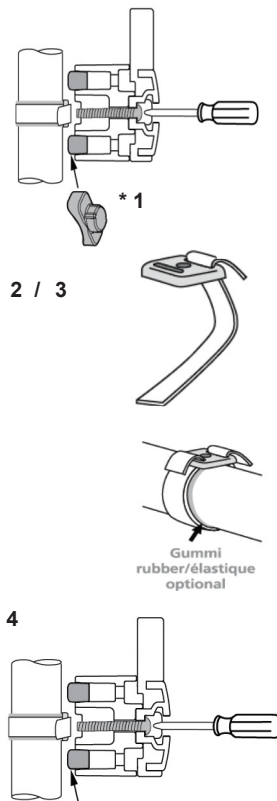

Mode d'emploi : Installation sur une surface plane ou un panneau*

* Possible uniquement si l'arrière de la surface est accessible.

Étapes d'installation

1. Choisissez l'emplacement :

Identifiez un endroit adapté pour fixer l'adaptateur.
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour pour fixer votre WheeBag® ou votre accessoire.

2. Percez les trous :

Percez 2 trous de 4,5 mm de diamètre, espacés de 26 mm entre leurs centres.

3. Fixez la base de l'adaptateur :


Utilisez 2 vis, les 2 rondelles, et les écrous ronds fournis.

Positionnez également la plaque de tension carrée comme indiqué dans le schéma.

4. Fixez la tête de l'adaptateur :


Vissez la tête en position verticale et droite.

**Votre WheeBag® ou
accessoire peut
maintenant être fixé !**

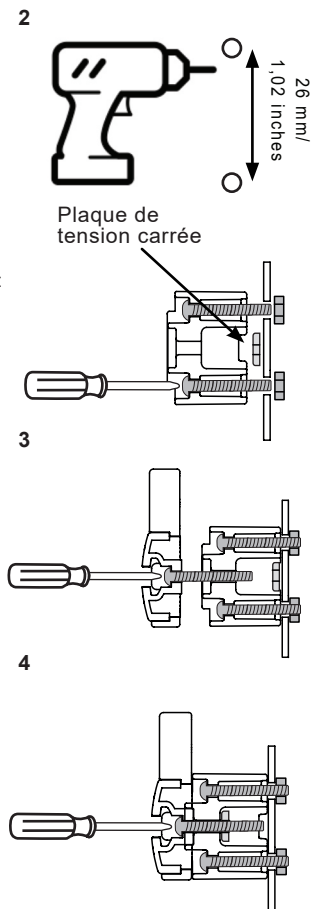

**Un WheeBag® compatible
avec différentes solutions
de mobilités.**

**A WheeBag® compatible
with different mobility
solutions**

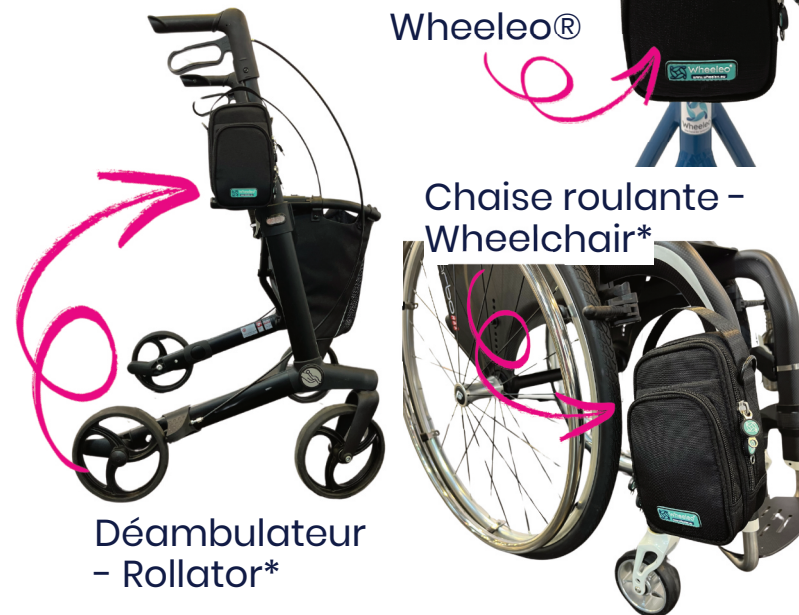

*Compatibilité à valider par l'utilisateur - Compatibility to be validated by user
Info@wheeleo.eu - InnoRehab SRL - Avenue des Combattants 93a 1340 Ottignies BELGIUM